

CARES® X-Stream™
All-in-One. eXtremamente eficiente.




straumanngroup
Digital Solutions

CARES® X-STREAM™ — eXtremamente eficiente

All-in-One: 1 digitalização, 1 desenho, 1 entrega

Minimize o tempo despendido e custos e aproveite uma vasta gama de opções de restauração.

O CARES® X-Stream™ é um fluxo de trabalho CAD/CAM altamente eficiente que lhe permite poupar tempo criando o pilar e a restauração correspondente (coroa, ponte ou sobredentadura) num único processo agilizado. Desenhe primeiro a restauração e deixe que o software desenhe o que fica subjacente à mesma. O pilar e a restauração são simultaneamente produzidas e enviadas conjuntamente.

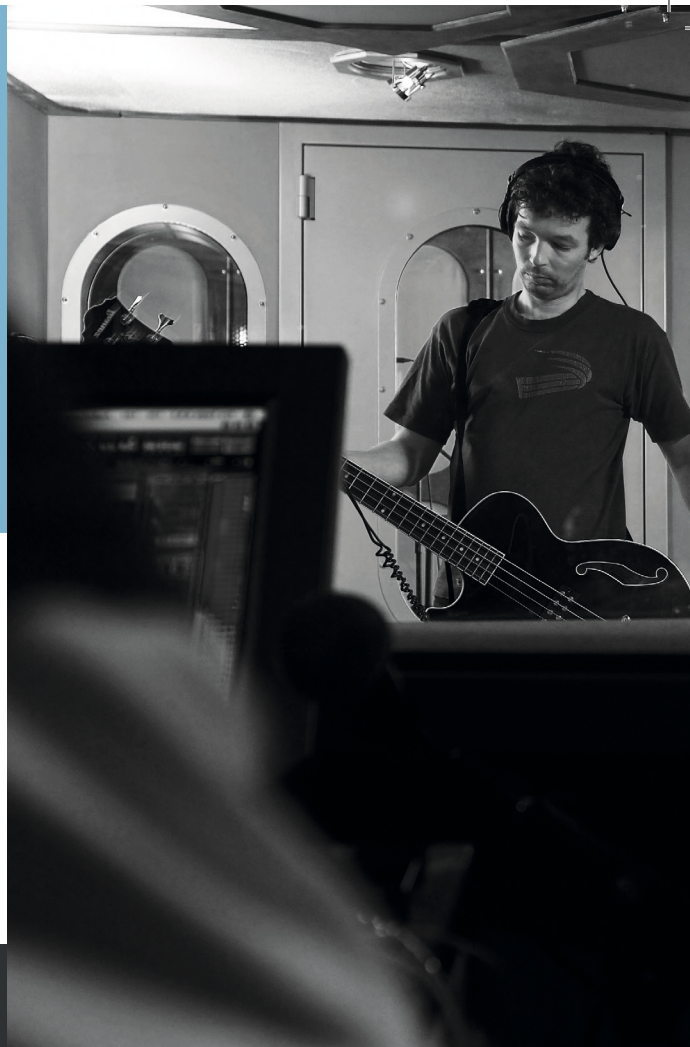

Produtividade

Maior produtividade graças a apenas um desenho, uma encomenda e uma entrega dos componentes protéticos.



Eficiência

Eficiência acrescida devido às próteses altamente precisas assegurando um melhor encaixe entre os componentes.



Qualidade

Qualidade consistente e reproduzível com desenho controlado e ambiente de fresagem associado ao fornecedor de materiais de renome.


	Restaurações			Sistemas de implante	Materiais
	Unitárias	Múltiplas	Edêntulo		
Cimentado	Pilares personalizados 	n/a	n/a	   	<ul style="list-style-type: none"> • Cerâmica vítrea • Dióxido de zircónio • Híbrido • Metal • Polímero
	Opções Ti-Base 	Opções Ti-Base 	n/a		
Aparafusado	Pilares personalizados 	n/a	n/a		
	Opções Ti-Base 	Opções Ti-Base 			

*MPS - Multi-Platform Systems (Sistemas com várias plataformas)



Solução aparafusada

Combina as vantagens de um pilar personalizado com o princípio Ti-Base e tem como benefício o fluxo de trabalho CARES® X-Stream™.

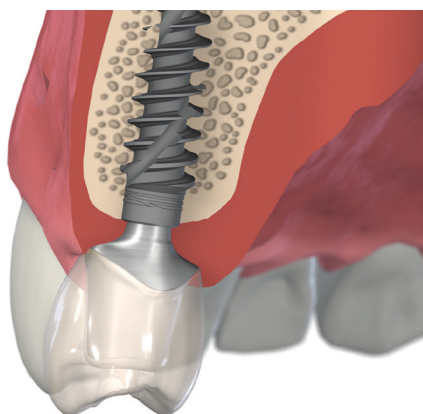

- Perfil de emergência personalizado permitindo a gestão individualizada dos tecidos moles de cada paciente
- Desenho individualizado da superfície do pilar que apoia uma retenção otimizada
- Acesso fácil para manutenção e conceito aparafusado
- Disponível com canal de parafuso reto e em dióxido de zircônia e polímero

CARES® X-Stream™

All-in-One. eXtremamente eficiente.

- 1 digitalização, 1 desenho, 1 entrega
- Vasta gama de soluções protéticas para restaurações unitárias, múltiplas e de casos edêntulos
- Opções protéticas para Straumann, Neodent e sistema de implantes Medentika
- Sistemas com várias plataformas
- Vasta gama de oferta de materiais
- Restaurações aparafusadas e cimentadas
- Disponível através do CARES® Visual, Dental Wings, 3Shape e Scan & Shape



Consulte o nosso website para informações mais específicas sobre combinações de materiais
www.straumann.com/cares-x-stream

490.672/pt/A/00 06/21

International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2021. Todos os direitos reservados.

Straumann® e/ou outras marcas comerciais e logótipos da Straumann® aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Straumann Holding AG e/ou suas afiliadas.

straumanngroup
Digital Solutions