

UNA NUEVA MENTALIDAD
NEODENT[®] CERAMIC IMPLANT SYSTEM



Ceramic
Implant System




Conexión
ZiLock[®]



Ceramic Implant System

Con las cada vez mayores expectativas en el acortamiento de plazos en los tratamientos estéticos, el Neodent® Ceramic Implant System combina las nociones de flexibilidad, estabilidad y estética. Esta solución sin metales permite tratar a los pacientes de forma inmediata y con un nivel estético elevado, gracias al moderno diseño del implante cerámico naturalmente cónico, con un completo portfolio protésico de cerámica.

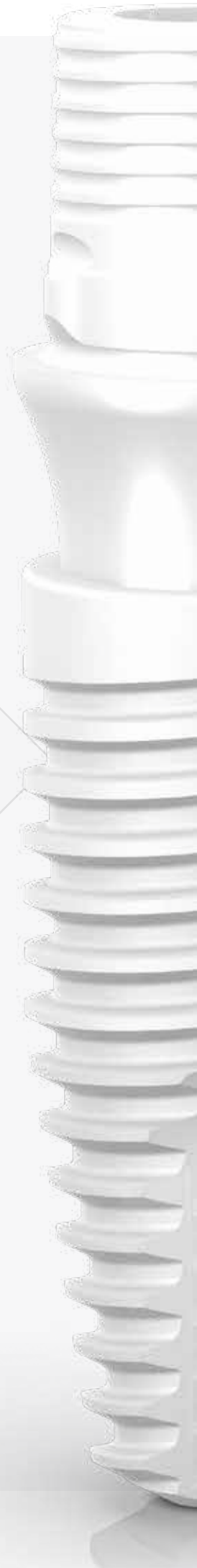



Una nueva mentalidad



Una nueva mentalidad
en cuanto a flexibilidad



Una nueva mentalidad
en cuanto a estabilidad



Una nueva mentalidad
en cuanto a estética



Una nueva **mentalidad** en cuanto a **flexibilidad**

Si busca responder a diversos tratamientos exigentes, el Ceramic Implant System ofrece la flexibilidad de una conexión de 2 piezas combinada con una sólida conexión atornillada de cerámica-cerámica.






SISTEMA DE CERÁMICA SÓLIDO Y FIABLE

La exclusiva conexión patentada ZiLock® está diseñada con un tornillo más largo que proporciona un acoplamiento seguro entre el implante de cerámica y el componente de cerámica. Además, mejora el rendimiento de la cerámica optimizando la distribución de la fuerza a lo largo de la conexión interna.

CONEXIÓN ZILOCK® SENCILLA


ZiLock® es una conexión interna recta de cerámica con 6 lóbulos y 6 puntos. Esta indexación tiene como resultado una colocación precisa del pilar, que protege frente a la rotación. El resultado es un sistema fácil de usar que proporciona una mayor flexibilidad de tratamiento en comparación con los implantes de una sola pieza.

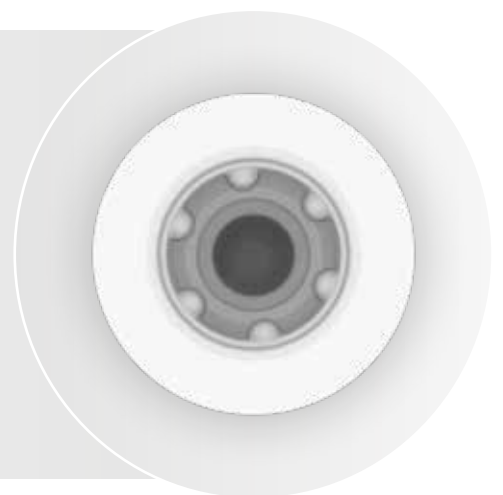



Una nueva **mentalidad** en cuanto a **estabilidad**

Con el objetivo de lograr protocolos inmediatos estables, Zi combina un diseño de implante naturalmente cónico con una superficie de implante tratada. Ambos diseñados para maximizar la estabilidad y predictibilidad en tratamientos inmediatos.

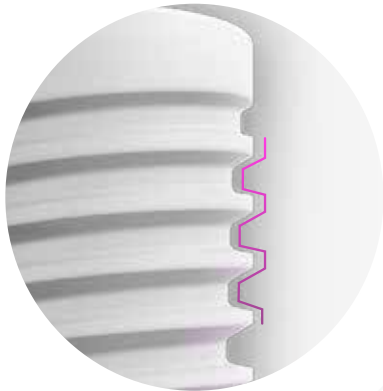

Diseño de rosca trapecoidal doble.



Apicalmente cónico con cámaras helicoidales.

DISEÑO CÓNICO PARA UNA ESTABILIDAD PRIMARIA

El Ceramic Implant System presenta una moderna geometría de implante cónica diseñada para una inmediatez predecible en todos los tipos de hueso. Esta característica se ha diseñado para imitar la forma cónica de la raíz de un diente natural, con lo cual se logra una elevada estabilidad primaria.

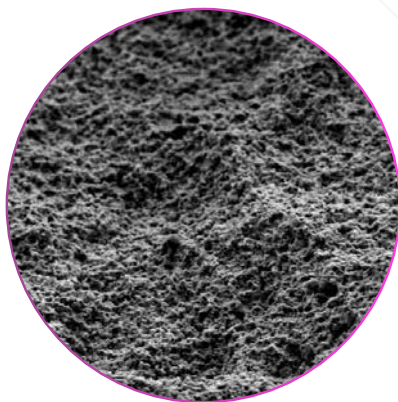


Imagen representativa de la superficie del implante; microscopio electrónico de barrido (SEM) a una ampliación de 5000x.

PREDICTIBILIDAD CON SUPERFICIE SOMETIDA A CHORREADO DE ARENA Y GRABADA AL ÁCIDO

Zi presenta el tratamiento superficial con chorreado de arena y grabado al ácido, que proporciona una macro y microrrugosidad basada en el tratamiento superficial altamente satisfactorio Neoporos®.



Una nueva **mentalidad** **en cuanto a estética**

Buscando un rendimiento estético excepcional, Zi ofrece, desde el propio material, cerámica, hasta el portfolio completo, un resultado estético natural.





RENDIMIENTO ESTÉTICO EXCELENTE

Con el objetivo de lograr resultados estéticos superiores, Neodent Ceramic Implant System busca ofrecer un rendimiento natural excepcional, con cerámica, un material superior, que contribuye a un resultado natural de la reconstrucción debido a su color que imita los dientes naturales, y se beneficia de una elevada translucidez en comparación con los metales.

UNA CARTERA PARA LOGRAR RESULTADOS ESTÉTICOS NATURALES

El portfolio protésico de cerámica permite el protocolo convencional o inmediato. Además, se puede aplicar el flujo de trabajo preferido, de **convencional a digital**, lo que proporciona una restauración de aspecto natural.



Base Zi



Prótesis atornillada unitaria



Prótesis cementada unitaria



Ø 3.75/4.5 mm



Base Zi para C



Prótesis atornillada unitaria



Prótesis cementada unitaria



Ø 4.65 mm



Componente CR Zi



Prótesis cementada unitaria



Ø 4.0/4.5 mm

Unidos por la excelencia

Unidos por la excelencia

Unidos por la excelencia

Unidos por la excelencia

Unidos por la excelencia



Una nueva **sonrisa todos los días**

Fundada por un dentista para dentistas, con el objetivo de cambiar las vidas de más pacientes. Neodent® es una marca internacional disponible en más de 80 países, con más de 3 millones de implantes vendidos cada año. Con un legado de más de 30 años centrados en la facilidad de uso, los sistemas de implantes dentales Neodent® se basan en conceptos de tratamiento progresivos como la inmediatez, con soluciones modernas y fiables para permitir el acceso a la terapia y la rentabilidad para la creación de nuevas sonrisas todos los días.

maxon

Movidos **por la precisión**

Fundado en 1961, maxon motor group es una compañía suiza centrada en ofrecer soluciones, calidad e innovación orientadas al cliente. Con más de 20 años de experiencia en moldeo por inyección cerámica (CIM) para piezas mecánicas de precisión, maxon ha ampliado la aplicación de su tecnología CIM para incluir implantes dentales y posee diversas aplicaciones de patentes en los últimos 10 años.

El 2016, Straumann Group y maxon decidieron unir su experiencia con la creación de maxon dental GmbH. Mediante la combinación de los puntos fuertes de Neodent® en odontología con el liderazgo tecnológico de maxon, el objetivo es ofrecer un sistema de implantes cerámico sencillo para los odontólogos y un tratamiento más asequible para los pacientes que desean soluciones altamente estéticas y sin metales.



NEODENT



Celebrar es una elección

Neodent® celebra su **30º** aniversario. Con el tiempo, se han creado millones de sonrisas en colaboración con profesionales de todo el mundo. Año tras año, Neodent® sigue celebrando la elección de crear nuevas sonrisas todos los días, para transformar las vidas de los pacientes de más de **80** países en los que la marca está presente.

Como líder en tratamiento inmediato, Neodent® ha desarrollado características exclusivas teniendo en cuenta los principios biológicos clave, diseñadas para maximizar la predictibilidad y lograr resultados duraderos.

© 2023 - JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Todos los derechos reservados. Todas las marcas mencionadas en este material, registradas o no, son propiedad de JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Se prohíbe la reproducción de este material sin previa autorización. Puede que la venta de algunos artículos todavía no esté disponible. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local.

Neodent®, Zi™, ZiLock® y NeoPoros® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Maxon es una marca comercial registrada de maxon dental GmbH. CARES es una marca comercial o una marca comercial registrada de Straumann Holding AG. 3Shape es una marca comercial o marca comercial registrada de 3Shape A/S. exocad es una marca comercial o marca comercial registrada de exocad GmbH. Dental Wings es una marca comercial o marca comercial registrada de Dental Wings Inc.

10491_neodent_zi_brochure_es_es_D00_lr_150223

毎日、とびっきりの笑顔を

NUOVI SORRISI OGNI GIORNO

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES

новые улыбки каждый день

JEDEN TAG EIN NEUES LÄCHELN

NUEVAS SONRISAS TODOS LOS DÍAS

NYA LEENDEN VARJE DAG

NEW SMILES EVERY DAY

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS

CHAQUE JOUR DE NOUVEAUX SOURIRES

NOVOS SORRISOS TODOS OS DIAS



www.neodent.com