

CRESCIMENTO COM TRANQUILIDADE

NEODENT[®] EASYPACK





CUMPRA AS EXPECTATIVAS DOS PACIENTES E CRESÇA COM TRANQUILIDADE ATRAVÉS DE TRATAMENTOS COM IMPLANTES

A procura por tratamentos com implantes está em constante crescimento, à medida que os pacientes adquirem mais conhecimentos sobre o tema e aumentam as expectativas em relação à duração do tratamento.

Existem atualmente várias opções disponíveis no mercado com diferentes desenhos de implante, opções de restauração, fluxos de trabalho aos quais falta a orientação e que podem dar origem a um aumento da complexidade, custo e tempo necessário, tanto para o paciente como para o médico dentista.

A Neodent® desenvolveu o EasyPack para simplificar a sua prática diária. Um conjunto tudo-em-um que oferece o que precisa para crescer, realizando tratamentos com implantes com confiança, orientação e de forma conveniente.



O Neodent® EasyPack é uma solução tudo-em-um:



CRESÇA COM CONFIANÇA

Escolha uma marca e produtos em que pode confiar



CRESÇA DE FORMA PRÁTICA

A certeza de ter tudo num só pacote



CRESÇA COM ORIENTAÇÃO

Todos os fluxos de trabalho em etapas simples



Com o Neodent® **EasyPack**, estou confiante de que disponho de todos os produtos necessários para ajudar o meu paciente, desde a colocação do implante até à restauração provisória e preparação dos tecidos para a prótese definitiva. E com o novo pilar GM Smart 3-em-1, fico à vontade para escolher o fluxo de trabalho mais adequado, facilitando assim a gestão de stock e outras escolhas.

DR. GENINHO THOMÉ



CRESCA COM CONFIANÇA

Com o aumento da procura por tratamentos com implantes, é essencial selecionar o sistema certo que lhe permita reabilitar com confiança. A Neodent® é uma marca global, fundada por um médico dentista e que faz parte do Straumann Group. Há 25 anos que a Neodent® tem vindo a focar-se no desenvolvimento de conceitos de tratamento progressivo para criar novos sorrisos todos os dias.

Neodent® uma marca líder a nível global

Fundada por um médico dentista para médicos dentistas, com o objetivo de mudar as vidas de mais pacientes. As soluções Neodent permitem o acesso a conceitos de tratamento progressivo, como a carga imediata, permitindo o acesso com implantes a custo acessível para que possa criar novos sorrisos todos os dias.



MARCA GLOBAL

Disponível em mais de 70 países, com mais de 2 milhões de implantes vendidos anualmente.



FUNDADA POR UM MÉDICO DENTISTA PARA MÉDICOS DENTISTAS

Um legado de mais de 25 anos focados na facilidade de utilização



CONCEITOS DE TRATAMENTO PROGRESSIVO

Solução moderna e de confiança



ACESSO A TRATAMENTO E EFICÁCIA EM TERMOS DE CUSTOS

Acesso a soluções comprovadas e economicamente comportáveis



Linha Grand Morse®: um sistema versátil de implantes

O Neodent® **EasyPack** apresenta em exclusividade o sistema de implantes Grand Morse que é o fruto de 25 anos de experiência em implantologia. Combina uma base forte e estável que permite um resultado estético natural e imediato, com versatilidade e facilidade de utilização.

UM SÓ DESENHO DE IMPLANTE

O Neodent® **Grand Morse**® permite opções de tratamento personalizadas, segundo a situação clínica específica, tendo em conta os princípios biológicos e o respeito pelos princípios fundamentais da implantologia.

Um desenho de implante inovador que combina um desenho de corpo integral duplamente cónico e um contorno exterior híbrido, maximizando as opções e a eficácia em todos os tipos de osso.



UMA CONEXÃO

A conexão Neodent® **Grand Morse**® oferece uma combinação única baseada em conceitos comprovados: "platform switch" associada a um cone Morse profundo de 16°, incluindo uma indexação interna para uma conexão estável e resistente, concebida para alcançar resultados duradouros.

Todos os implantes Neodent® **Grand Morse**® apresentam a conexão exclusiva **Grand Morse**®, independentemente do diâmetro do implante.



UM KIT

Todos os implantes Neodent® **Grand Morse**® podem ser colocados com um kit cirúrgico intuitivo e funcional (cirurgia convencional ou guiada).

Este kit inclui um fluxo de trabalho cirúrgico com códigos de cor, bem como instrumentos de restauração simplificados, com uma única chave de parafusos para todos os componentes de cicatrização e parafusos de restauração.



Saiba mais acerca do portfólio protético e cirúrgico Grand Morse® completo.
Digitalize o código QR ou aceda à hiperligação seguinte:

<https://www.straumann.com/neodent/com/en/professionals/implant-systems/implants-line/gm-implant-line.html>

CRESÇA DE FORMA PRÁTICA

A oferta de tratamentos com implantes pode representar uma complexidade significativa, devido à variedade, especificações técnicas e investimentos necessários. O Neodent® **EasyPack** foi concebido para simplificar todo o tratamento da indicação mais frequente: substituição de um só dente, da raiz ao dente.

A simplicidade de ter um conjunto tudo-em-um

O Neodent® **EasyPack** combina num só conjunto todos os componentes necessários para a substituição de um só dente, com colocação de implante, fase de cicatrização, restaurações provisórias e moldagens. Simplificar o acesso a opções flexíveis de restauração definitiva



O NEODENT® EASYPACK INCLUI

- 1 Implante **Grand Morse® Helix**
- 2 Tampa de fecho **Grand Morse®**
- 3 Pilar de cicatrização **Grand Morse®**
- 4 Análogo de implante híbrido **Grand Morse®**
- 5 Pilar **Grand Morse® 3-in-1 Neodent Smart Abutment™**

NOVO



Solução flexível para substituição de um só dente

O Neodent® **EasyPack** foi desenvolvido para oferecer total flexibilidade sem comprometer a simplicidade. Permite o seu acesso a opções simples para o tratamento de restauração de um só dente:



UNITÁRIA

- abordagem de cicatrização em 1 ou 2 fases
- carga imediata ou convencional
- moldagem digital ou com moldeira fechada
- fluxo de trabalho digital ou convencional
- restaurações aparafusadas ou cimentadas



CRESÇA COM ORIENTAÇÃO

Com a atual multiplicação de tecnologias, a falta de conectividade e a restauração de um implante com flexibilidade continua a ser um desafio para os médicos dentistas.

A Neodent® desenvolveu o **pilar GM Smart**, uma combinação 3-em-1 concebida para alcançar resultados fiáveis de restauração com eficiência.

O novo e eficiente pilar 3-em-1 GM Smart

O pilar Neodent® **GM Smart** é uma solução patenteada única que combina um coping de moldagem em moldeira fechada, um scanbody digital e um pilar provisório num só componente, permitindo-lhe maximizar a flexibilidade do fluxo de trabalho com simplicidade.



COPING DE MOLDAGEM

Com o desenho anti-rotacional, o pilar GM Smart inclui uma tampa de moldagem, concebida para a técnica standard de moldagem com moldeira fechada.

SCANBODY DIGITAL

Adequado para utilização com um scanner intraoral ou de laboratório, o pilar GM Smart apresenta um tratamento de superfície único concebido para facilitar o rigor de uma digitalização eficiente e ótima.

PILAR PROVISÓRIO

Feito em titânio, o pilar Smart integra duas alturas de chaminé personalizáveis e flexíveis (4 ou 6 mm) concebidas para criar um elemento provisório personalizado usando um fluxo de trabalho convencional ou digital.



Fluxo de trabalho de restauração guiado e fiável

Aceda aos fluxos de trabalho de restauração guiados com o Neodent® EasyPack. A combinação do pilar GM Smart com componentes de cicatrização e o análogo permite-lhe escolher um percurso de restauração guiada para alcançar resultados previsíveis.

- 01** COLOCAÇÃO DO IMPLANTE
- 02** FASE DE CICATRIZAÇÃO
- 03** FASE DE MOLDAGEM
- 04** RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA
- 05** RESTAURAÇÃO DEFINITIVA



PROVISÓRIA IMEDIATA

SALTAR ESTA ETAPA

OU



ABORDAGEM EM 1 OU 2 ETAPAS

TAMPA DE FECHO PILAR DE CICATRIZAÇÃO



DIGITALIZAÇÃO



MOLDEIRA FECHADA



PILAR PROVISÓRIO



FLUXO DE TRABALHO CONVENCIONAL



FLUXO DE TRABALHO DIGITAL

CASO CLÍNICO

Restauração unitária imediata em regiões posteriores inferiores com o Neodent® EasyPack



PROVISÓRIA
IMEDIATA

1

COLOCAÇÃO DO IMPLANTE

2

FASE DE MOLDAGEM



Aspetto clínico inicial, perspectiva oclusal (área do dente 46)




Osteotomia com o sistema Neodent® controlo



Posições do implante e o software



Aspetto clínico inicial, perspectiva lateral (área do dente 36)

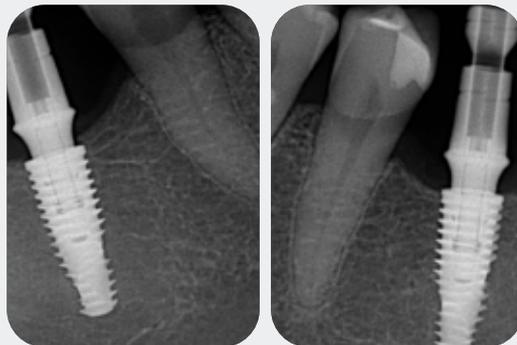

Radiografias periapicais imediatas após a colocação do implante e com o pilar GM Smart em posição

DR. GENINHO THOMÉ

BRASIL

Mestrado e Doutorado em Implantologia,
Diretor Científico da Neodent

Presidente do Conselho de
Administração da Neodent



3

RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA

4

RESTAURAÇÃO DEFINITIVA




te transferidas para
e CAD/CAM



Coroas fresadas em PMMA e pilares
GM Smart personalizados



Aspeto clínico final da coroa
protética definitiva

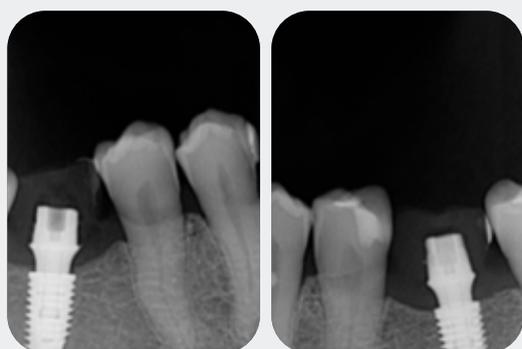

Radiografias após 4 dias, com os pilares GM
Smart como pilares provisórios



Aspeto clínico após 4 dias

* Imagens gentilmente cedidas pelo
Dr. Geninho Thomé e respetiva equipa

© 2022 – JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Todos os direitos reservados. Todas as marcas mencionadas no presente material, registadas ou não, são propriedade da JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. Está proibida a reprodução deste material sem autorização prévia.
10330_neodent_easypack_brochure_pt_pt_A01_lr_110222